


# Oxy<sub>2</sub>Mask™ – Eine Maske, viele Anwendungen

Dank leichtem und offenem Design ist Oxy<sub>2</sub>Mask™ ein hocheffizientes Maskensystem. Die innovative Sauerstoffmaske ersetzt mehrere konventionelle Produkte in der Sauerstofftherapie, kommt sie doch gänzlich ohne Ventile und Reservoirs aus.

## Mehr Sicherheit. Mehr Tragekomfort.


- Verringert das Risiko einer CO<sub>2</sub>-Rückatmung
- Reduziert die Gefahr der Aspiration von Erbrochenem
- Für Nasen- und Mundatmung
- Kein Wärme- oder Feuchtigkeitsstau unter der Maske
- Reduziert das Gefühl der Klaustrophobie
- Ermöglicht uneingeschränkte Kommunikation sowie das orale Verabreichen von Flüssigkeiten
- Für Babys, Kinder und Erwachsene
- Endoskopische Zugänge möglich
- Konnektor ist 360° drehbar

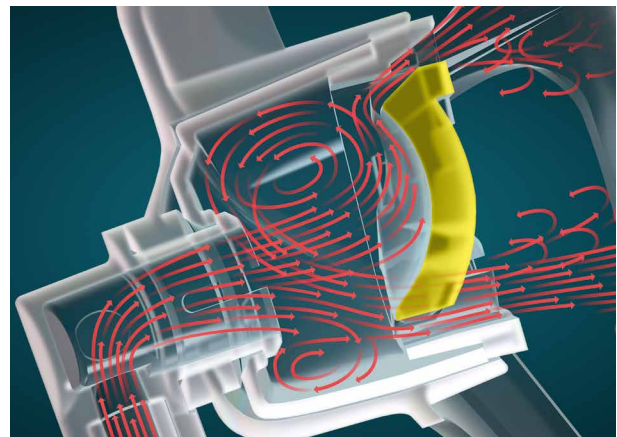

## Verbesserte Flow-Technologie für mehr Dynamik des Diffusors

Vier aerodynamische Diffusoröffnungen leiten den Sauerstoff mit erhöhter Geschwindigkeit gezielt zu Nase und Mund. Dadurch entsteht eine Wolke aus Sauerstoffmolekülen. Das neue Design maximiert das Potenzial der dem Patienten zugeführten Sauerstoffwirbel.

## Oxy<sub>2</sub>Mask™ vs. herkömmliche Produkte

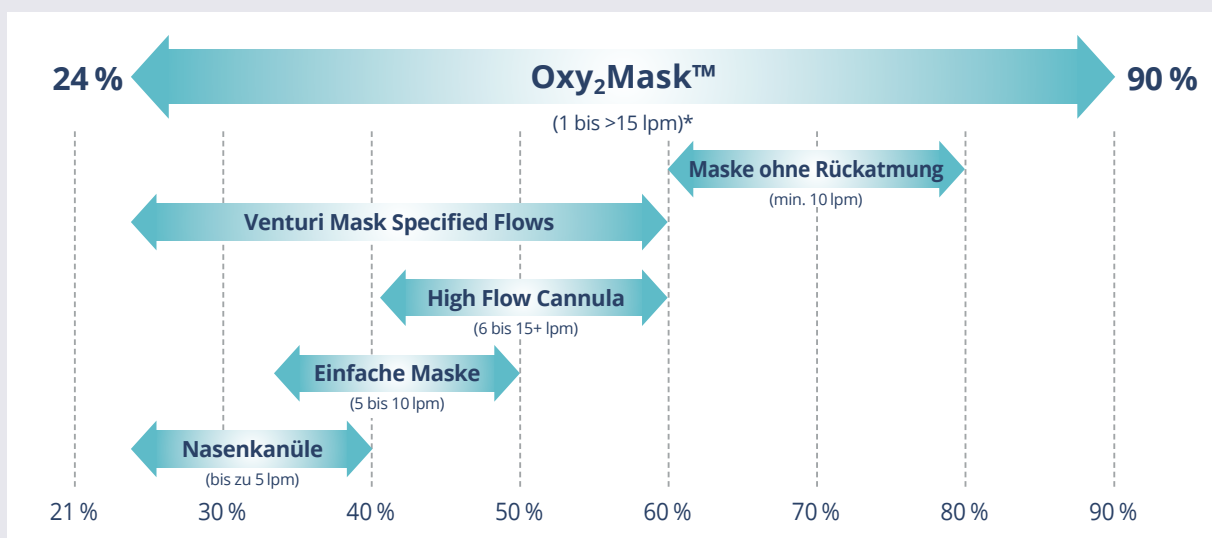

Das patentierte Design der Oxy<sub>2</sub>Mask™ gibt es in vier Größen:



**Oxy<sub>2</sub>Mask™ Adult**  
liefert Flussraten  
von 1 bis 15 Liter  
pro Minute  
plus Flush bei einem  
FiO<sub>2</sub> von 24 % bis 90 %.

**Oxy<sub>2</sub>Mask™ Plus**  
die um 25 % größere  
Maske liefert idente  
Flussraten wie  
Oxy<sub>2</sub>Mask™ Adult

**Oxy<sub>2</sub>Mask™ Kid**  
für Kinder von 3 bis  
10 Jahren: liefert  
Sauerstoffflüsse  
von 1 bis 15+ Liter  
pro Minute – bündig,  
24 % bis 90 % FiO<sub>2</sub>

**Oxy<sub>2</sub>Mask™ Tyke**  
für Kinder von  
6 Monaten bis 3 Jahre:  
liefert Sauerstoffflüsse  
von ¼ bis 5+ Liter  
pro Minute,  
22 % bis 65 % FiO<sub>2</sub>

BESTELLINFORMATIONEN		
ARTIKEL	VPE	ART. NR.
Oxy <sub>2</sub> Mask™ Adult	25 Stk.	SM-OM-1125-8
Oxy <sub>2</sub> Mask™ Plus	25 Stk.	SM-OP-1125-8
Oxy <sub>2</sub> Mask™ Kid	25 Stk.	SM-OK-1125-8
Oxy <sub>2</sub> Mask™ Tyke	25 Stk.	SM-OT-1125-8

